
Mepiform®

Pansement auto-adhésif pour le traitement des cicatrices

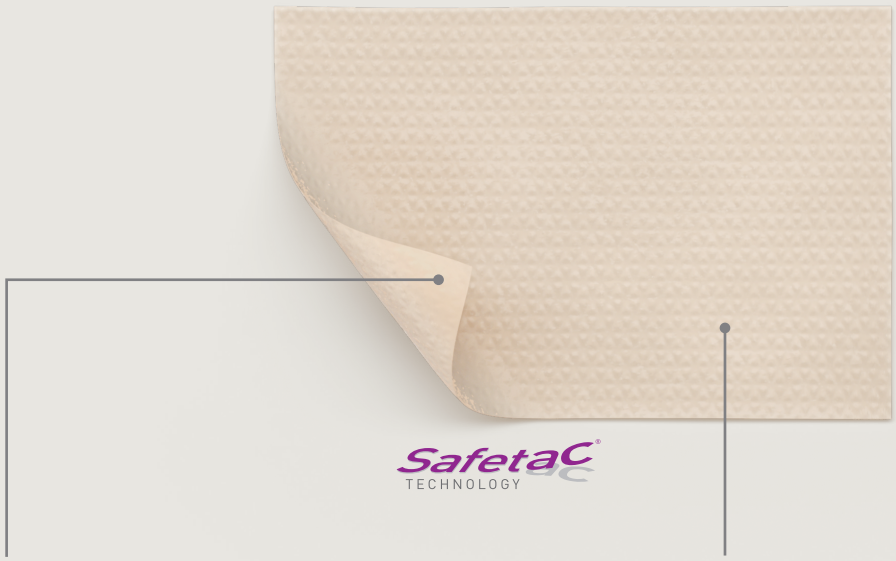

Film protecteur non tissé


- Respirant
- Imperméable à l'eau


Couche Safetac®

- Technologie adhésive en silicone souple
- Minimise la douleur et les traumatismes lors du retrait[1]

Technologie Safetac®. Moins de traumatismes. Moins de douleur.

Les pansements dotés de la technologie Safetac sont atraumatiques au moment de leur retrait[1]. Ces pansements minimisent les lésions de la plaie et de la peau périlésionnelle[2,3], réduisant ainsi la douleur pour le patien[1]. Ils minimisent le risque de macération en scellant les bords de la plaie[4].

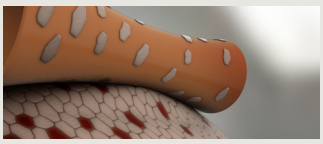
Sans Safetac

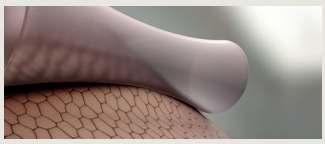

Avec Safetac

Mepiform® est un pansement en silicone souple et auto-adhésif pour le traitement des cicatrices. Il est destiné à prendre en charge les cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes existantes et à prévenir la formation de nouvelles cicatrices. Il peut également être utilisé en prévention sur des plaies fermées pour prévenir la formation de cicatrices hypertrophyques ou chéloïdes.


- Réduction et prévention des cicatrices cliniquement prouvées
- Aucune fixation supplémentaire nécessaire[5]
- S'adapte bien aux contours du corps[6]
- Peut être porté pendant les activités de la vie quotidienne[7]

Mölnlycke®


Utilisation de Mepiform®

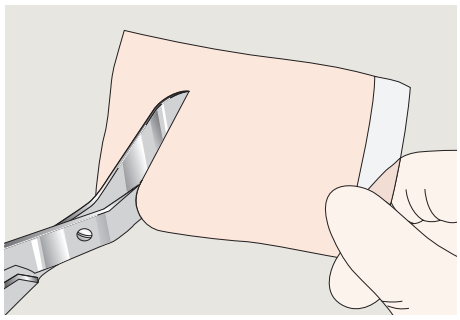

1. Otez le film protecteur. Le cas échéant, découpez la forme souhaitée, avant d'enlever le film protecteur.

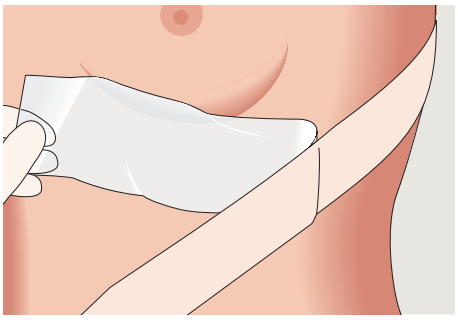

2. Appliquer Mepiform sur une peau propre et sèche. Si vous utilisez préalablement de la crème ou de la pommade, assurez-vous que Mepiform recouvre l'extérieur de cette zone.

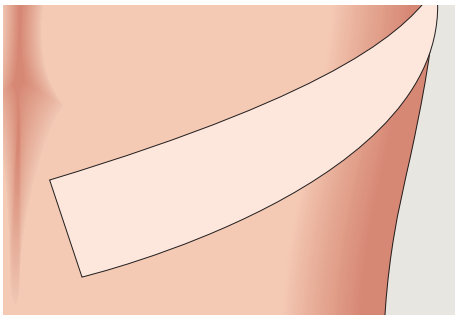

3. Enlevez le pansement une fois par jour pour nettoyer la peau.

Avantages de Mepiform

- Réduction et prévention des cicatrices cliniquement prouvées
- Adhère en douceur aux tissus fragiles et à la peau, rendant les changements de pansement moins douloureux
- Économique à long terme, car une seule feuille peut être utilisée pendant plusieurs jours
- Confortable à porter car il s'adapte bien aux contours du corps
- Mince et flexible



Mode d'action de Mepiform

On a montré de façon empirique que la silicone topique a un impact positif sur les cicatrices hypertrophiques et les chéloïdes[5,8]. L'amélioration d'une cicatrice ancienne peut prendre de 3 mois à un an, selon l'état du tissu cicatriciel. Mepiform® doit être porté 24 heures sur 24. Il est conseillé de l'enlever une fois par jour, au moment du bain ou de la douche, afi n d'inspecter et de nettoyer la peau. A titre préventif, Mepiform® sera appliqué pendant 2 à 6 mois, selon l'état du tissu cicatriciel.

Gamme Mepiform (emballage stérile)

n° art.	code CNK	Taille (cm)	Pcs/RET	Pcs/TRP
293100	1457-266	4 x 30	5	50
293200	1457-274	5 x 7,5	5	25
293400	1457-282	10 x 18	5	35

Indications

Mepiform est conçu pour le traitement des cicatrices hypertrophiques, des chéloïdes, anciennes ou récentes, ainsi que des plaies fermées. Mepiform peut également aider à prévenir la formation de cicatrices hypertrophiques et chéloïdes.

Remarque

En cas de macération ou d'éruption cutanée, laissez la peau se reposer jusqu'à disparition des symptômes. Reprenez le traitement en augmentant progressivement la durée quotidienne.

Mepiform offre un facteur de protection UV équivalant à 5[9].

Références : 1. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; 4: 1, 14-22. **2.** Dahlstrøm, K.K. A new silicone rubber dressing used as a temporary dressing before delayed split skin grafting. A prospective randomised study. Scandinavian Journal of Plastic Reconstructive Surgery and Hand Surgery 1995;29(4):325-327. **3.** Waring, M., Biefeldt, S., Matzold, K.P., Butcher, M. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care 2011;20(9):412-422. **4.** White, R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005; 1: 3, 104-109. **5.** Colom Majan, J.L. Evaluation of a self-adherent soft silicone dressing for the treatment of hypertrophic post-operative scars. Journal of Wound Care 2006;15(5):193-196.**6.** Meuleneire, F. Using a soft silicone dressing (Mepiform) to prevent scarring in an acute traumatic wound. Wounds UK 2007;3(4):134-135. **7.** Saulsberry, C.M., Abney, S.B., Landry, K.N.. An evaluation of a new silicone dressing for the management of hypertrophic scars. Poster presentation at the 12th Symposium on Advanced Wound Care and Medical Research Forum on Wound Repair, Anaheim, California, United States of America, 1999. **8.** Mustoe, T.A., Cooter, R.D., Gold, M.H., Hobbs, R., Ramelet, A.A., Shakespeare, P.G. et al., Stella, M., Teot, L., Wood, F.M., Ziegler, U.E., for the International Advisory Panel on Scar Management. International clinical recommendations on scar management. Plastic and Reconstructive Surgery 2002;110 (2): 560-571. **9.** Data on file, Mölnlycke Health Care, 2015.

Pour d'autres informations, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72 boîte 2, 2600 Berchem (Anvers), Tél: +32(0)3 286 89 50.
Les marques, noms et logos Mölnlycke, Mepiform, Safetac sont déposés par une ou plusieurs sociétés du groupe Mölnlycke Health Care pour le monde entier. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. BFWC00112505

Mölnlycke®