Mölnlycke®

Mepilex® Border Flex Lite

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

FOAM DRESSING

Revised 2025-02

40681-45

Master PD-709689 Rev. 1

PD-753840 Rev. 2

Manufacturer / Fabricant
Mölnlycke Health Care AB
Entreprenörsstråket 21
SE-431 53 Mölndal, Sweden

NATURAL RUBBER LATEX


This product and its packaging are not made with natural rubber latex


Ni el producto ni su embalaje se han fabricado utilizando látex de caucho natura

www.molnlycke.com/symbols

Patent: www.molnlycke.com/virtual-patent-marking/

Mepilex® Border Flex Lite

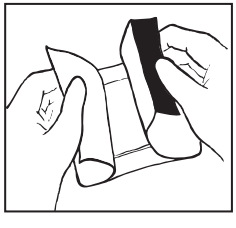

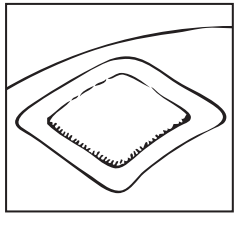

Toll free number :
USA 1-800-882-4582

Made in Finland

What is Mepilex® Border Flex Lite? en

Mepilex Border Flex Lite is a flexible and conformable self-adherent, absorbent and showerproof dressing that maintains a moist wound environment. The waterproof backing layer protects the wound from dirt and bacteria. Safetac Innovative Adhesive Technology, minimizes pain when removing dressings, and minimizes damage to wounds and surrounding skin when removing dressings.

About Safetac® Technology Adhesive Layer

Safetac Technology Adhesive Layer keeps the dressing in place while gentle to skin and easy to use.

You can find Safetac® Technology in the following wound care brands: Mepilex® Lite, Mepilex® Border Flex, Mepilex® Border Flex Lite, Mepilex® Border Post-Op and Mepitac®. Read more at www.molnlycke.com.

What is Mepilex® Border Flex Lite for?

Mepilex Border Flex Lite is designed for a range of light draining wounds, such as abrasions, blisters and minor surgical incisions.

Material content

Dressing: Silicone, polyurethane, polyacrylate, viscose, polyester, polyolefin.

Precautions

- Do not use if you or the patient have a known hypersensitivity to the dressing or its ingoing materials, see Material content
- Do not use together with oxidizing cleaning solutions such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide
- If you see signs of infection e.g. fever or the wound or surrounding skin becoming red, warm or swollen, consult your health care professional, nurse or doctor
- Do not reuse. If reused performance of the product may deteriorate, cross contamination may occur
- Sterile dressing. Do not use if inner package is damaged or opened prior to use
- If the status of the wound has not significantly improved within 7 days, consult your health care professional, nurse or doctor

Instructions for use

1. Clean the wound with mild soap and water
2. Dry the surrounding skin thoroughly
3. To ensure proper adhesion, do not use moisturizers on the skin covered by the dressing
4. Select an appropriate size. The wound pad should cover the dry surrounding skin by at least ½ inch
5. Remove the first protective film covering the adhesive side of the dressing
6. Apply the adhesive side to the wound
7. Remove the remaining protective film and smooth down the border on the skin. Do not stretch

The dressing change interval may be several days. Change the dressing before it is fully saturated, at signs of leakage, or as indicated by healthcare provider.

Special storage- and handling conditions

Should be stored in dry conditions. The foam may become more yellow when exposed to light, air and/or heat. This has no influence on product properties. Disposal should be handled according to local environmental procedures.

Other information

Mepilex Border Flex Lite is a single use product.

This product and its packaging are not made with Natural Rubber Latex (NRL).

If the product is used after expiry date, product properties cannot be ensured.

The Mölnlycke trademarks, including Mölnlycke®, Mepilex® and Safetac® name and logo are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies.

¿Qué es Mepilex® Border Flex Lite? es

Mepilex Border Flex Lite es un cómodo apósito autoadhesivo flexible, absorbente e impermeable que mantiene un nivel de humedad óptimo en el lecho de la herida. La capa de soporte impermeable protege la herida de la suciedad y las bacterias. La innovadora tecnología de adhesivo Safetac minimiza el dolor al retirar los apósitos, así como el traumatismo en las heridas y la piel circundante.

Acerca de la capa adhesiva con tecnología Safetac®

Además de mantener el apósito en su sitio, la capa adhesiva con tecnología Safetac es suave al tacto y fácil de usar.

La tecnología Safetac® se puede encontrar en los siguientes productos para el tratamiento de heridas: Mepilex® Lite, Mepilex® Border Flex, Mepilex® Border Flex Lite, Mepilex® Border Post-Op y Mepitac®. Para más información en www.molnlycke.com.

¿Para qué se utiliza Mepilex® Border Flex Lite?

Mepilex Border Flex Lite ha sido diseñado para una amplia variedad de heridas con un nivel de exudado leve, como, abrasiones, ampollas o incisiones quirúrgicas leves.

Materiales contenidos

Apósito: Silicona, poliuretano, poliacrilato, viscosa, poliéster y poliolefina.

Precauciones

- No lo utilice si usted o el paciente tienen hipersensibilidad diagnosticada a los apósitos o sus materiales; consulte el inserto «Materiales contenidos».
- No utilice este apósito en combinación con soluciones de limpieza oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
- Si observa signos de infección, como fiebre, enrojecimiento, calentamiento o hinchazón de la herida, consulte a su profesional sanitario, enfermero o médico.
- No lo reutilice. En caso de reutilización, el rendimiento del producto se deteriora y puede producirse contaminación cruzada.
- Apósito estéril. No use el producto si el envoltorio interior está dañado o abierto antes de su uso.
- Si el estado de la herida no ha mejorado significativamente en un plazo de 7 días, consulte a su profesional sanitario, enfermero o médico.

Instrucciones de uso

1. Limpie la herida con agua y jabón suave.
2. Seque bien la piel circundante.
3. Para garantizar una adhesión adecuada, no utilice cremas hidratantes en la zona de aplicación del apósito.
4. Seleccione un tamaño adecuado. El cuerpo absorbente debería cubrir la piel circundante seca al menos 1,25 cm (½ in).
5. Retire el primer film protector que cubre la cara adhesiva del apósito.
6. Coloque el lado adhesivo sobre la herida.
7. Retire el resto del film protector y alise el borde sobre la piel. No estire el producto.

La frecuencia de cambio del apósito puede ser de varios días. Cambie el apósito antes de que esté completamente saturado, si se aprecian signos de fugas o según las indicaciones del profesional sanitario.

Condiciones especiales de almacenamiento y manipulación

Debe almacenarse en un lugar seco. El color de la espuma puede volverse más amarillo cuando se exponga a la luz, al aire o al calor. Este cambio no repercutirá en las propiedades del producto. Debe desecharse respetando los procedimientos medioambientales locales.

Otra información

Mepilex® Border Flex Lite es un producto de un solo uso.

Ni el producto ni su embalaje se han fabricado utilizando látex de caucho natural (NRL).

No se garantizan las propiedades del producto si se utiliza después de su fecha de caducidad.

La marcas, el nombre y el logotipo de Mölnlycke, incluidas Mölnlycke®, Mepilex® y Safetac®, están registrados a nivel mundial en uno o varios grupos de empresas de Mölnlycke Health Care.