Mode d'emploi

Mepilex Border Post-Op Ag doit être utilisé par un professionnel de santé qualifié ou sous son contrôle.

Veiller à respecter les règles d'hygiène en vigueur avant et après le remplacement du pansement.

1. Nettoyer la plaie avec une solution saline ou de l'eau selon le protocole de soin en vigueur.
2. Sécher soigneusement la peau périlésionnelle.
3. La compresse du pansement Mepilex Border Post-Op Ag doit déborder de la plaie sur au moins 1 à 2 cm afin de protéger la peau périlésionnelle de la macération et permettre une bonne fixation du pansement.
4. Pour les pansements dotés d'un seul feuillet protecteur, retirer celui-ci partiellement ou complètement. Pour les pansements dotés de deux feuillets protecteurs, retirer partiellement ou complètement le petit feuillet, puis retirer partiellement ou complètement le grand feuillet.
5. Appliquer la face adhésive sur la plaie afin de permettre la fixation initiale du pansement. Le cas échéant, retirer délicatement les feuillet(s) protecteur(s) restant(s) tout en lissant le pansement de l'autre main pour éviter les plis. Ne pas étirer le pansement durant l'application.
6. Saisir le bord cadre blanc et détacher la perforation.
7. Retirer délicatement le bord cadre blanc. Éviter les plis pendant la fixation des bords en lissant le pansement de l'autre main.

En fonction du patient, de l'état de la plaie et de la peau périlésionnelle ou selon le protocole clinique établi, Mepilex Border Post-Op Ag peut rester en place jusqu'à sept jours.

Dans un premier temps, il peut être nécessaire de renouveler le pansement Mepilex Border Post-Op Ag plus fréquemment, la modification du traitement pouvant générer une augmentation initiale de la quantité d'exsudats.

La durée du traitement avec Mepilex Border Post-Op Ag ne doit pas dépasser 4 semaines. Au-delà, une évaluation clinique doit être réalisée par un médecin.

Conditions particulières de stockage et de manipulation

Mepilex Border Post-Op Ag doit être conservé dans un endroit sec, à une température inférieure à 25 °C/77 °F et à l'abri de la lumière directe. Les variations de couleur du pansement Mepilex Border Post-Op Ag n'affectent ni les performances ni la sécurité du produit.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les procédures environnementales en vigueur.

Informations complémentaires

En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation du pansement Mepilex Border Post-Op Ag, il doit être signalé à Mölnlycke Health Care ainsi qu'aux autorités locales compétentes.

Mepilex® et la technologie Safetac® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.

Revised 2025-02

41027-45

Master PD-598169 rev 02

PD-771905 rev 1

www.molnlycke.com/symbols

STERILE EO

Single use
Usage unique

See instructions for use
Voyez le mode d'emploi

Do no use if package is damaged
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Showerproof
Résistant(e) à l'eau

Keep dry
Conserver au sec

Keep away from sunlight
Tenir à l'abri de la lumière du soleil

25°C / 77°F

Upper temperature limit
Limite de température supérieure

00×00 cm
00×00 in

Wound pad size
Taille de la matricea

For low exuding wounds
Pour les plaies faiablement exsudatives

For moderately exuding wounds
Pour les plaies modérément exsudatives

For highly exuding wounds
Pour les plaies hautement exsudatives


Patent: www.molnlycke.com/virtual-patent-marking/

Toll free number:
USA 1-800-882-4582
Canada 1-800-494-5134

Mölnlycke®

Mepilex® Border Post-Op Ag


WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

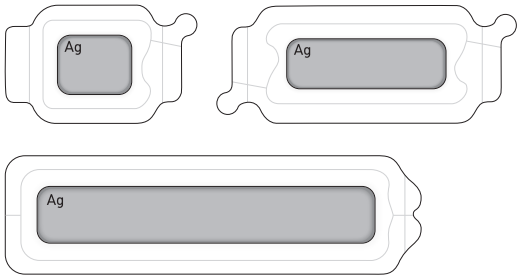


Manufacturer/Fabricant
Mölnlycke Health Care AB
Entreprenörsstråket 21
SE-431 53 Mölndal, Sweden

www.molnlycke.com


For products 6×8, 6×12, 9×10 cm

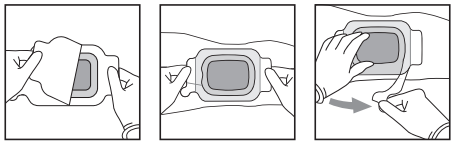

For products 10×15, 10×20, 10×25, 10×30 cm

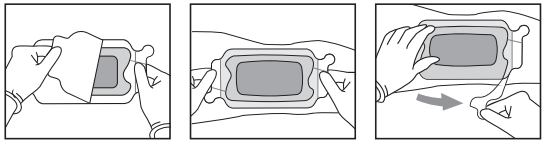

For product 10×35 cm

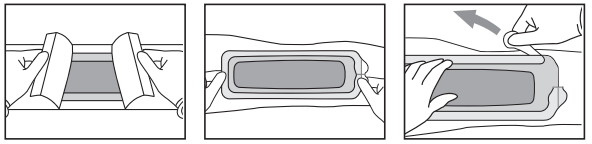

en Mepilex® Border Post-Op Ag

Self-adherent antimicrobial soft silicone foam dressing

℞ only

Caution: Federal [USA] Law restricts this device to sale by or on the order of a physician [or properly licensed practitioner].

Product description

Mepilex Border Post-Op Ag consists of a Safetac® soft silicone wound contact layer, an absorbent polyurethane foam pad containing a silver compound and activated carbon, a layer with super absorbent polyacrylate fibres, a non woven and a vapour permeable waterproof film.

Mepilex Border Post-Op Ag is a soft silicone foam dressing that absorbs exudate, maintains a moist wound healing environment and has antimicrobial properties.

Mepilex Border Post-Op Ag has been shown to inactivate wound related pathogens up to 7 days in vitro.

Dressing material content:

Polyurethane, silicone, polyacrylate, cotton, viscose, polyester, polyolefin, silver sulfate which equals to 1.2 mg/cm^2 silver.

Indications for use

Mepilex Border Post-Op Ag dressing is indicated for the management of exuding wounds such as surgical and traumatic wounds.

Mepilex Border Post-Op Ag can also be used under compression bandaging.

Silver sulfate present in the dressing helps reduce microbial colonization in the dressing.

Precaution(s)

- Do not use Mepilex Border Post-Op Ag on patient and/or user with known hypersensitivity to the ingoing materials/components of the product.
- Clinicians/healthcare professionals should be aware that there are very limited data on prolonged and repeated use of silver containing dressings, particularly in children and neonates.
- Mepilex Border Post-Op Ag may cause transient discoloration of the wound bed and surrounding skin. Frequent or prolonged use of this product may result in permanent discoloration of skin.
- In the event of clinical infection Mepilex Border Post-Op Ag does not replace the need for systemic therapy or other adequate infection treatment.
- Prior to commencing radiation therapy remove Mepilex Border Post-Op Ag if product is present in the treatment area. A new dressing can be applied following treatment.
- Avoid contact with electrodes or conductive gels during electronic measurements, e.g. electrocardiograms (ECG) and electroencephalograms (EEG).
- Do not use Mepilex Border Post-Op Ag together with oxidising agents such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide.
- Other than saline solution or water, the interaction of cleansing agents in combination with Mepilex Border Post-Op Ag has not been demonstrated.
- The interaction of Mepilex Border Post-Op Ag with other topical treatments has not been demonstrated.
- For external use only.
- Do not reuse. If reused performance of the product may deteriorate, cross contamination may occur.
- Sterile. Do not use if sterile barrier is damaged or opened prior to use. Do not re-sterilise.
- Do not use after expiry date. If the product is used after the expiry date product properties cannot be ensured.

Instructions for use

Mepilex Border Post-Op Ag should be used by or under the supervision of a qualified health care professional.

Note that local hygiene procedures should be followed prior to and following the dressing change.

1. Cleanse the wound with saline solution or water according to standard clinical practice.
2. Dry the surrounding skin thoroughly.
3. The Mepilex Border Post-Op Ag wound pad should overlap the wound by at least 1-2 cm in order to protect the surrounding skin from maceration and fixate the dressing securely.
4. For dressings with one release film, remove the release film partly or completely. For dressings with two release films, remove the small release film partly or completely and then remove the large release film, partly or completely.
5. Apply the adherent side to the wound, allowing initial fixation of the dressing. If applicable, gently remove the remainder of the release film(s) while smoothening the dressing with the other hand to avoid wrinkles. Do not stretch the dressing during application.
6. Grip the application frame and tear the perforation apart.
7. Gently remove the application frame. Avoid wrinkles while fixating the edges by smoothening the dressing with the other hand.

Mepilex Border Post-Op Ag may be left in place for up to seven days, depending on the patient, the condition of the wound and surrounding skin, or as indicated by accepted clinical practice.

Initially, it might be required to change Mepilex Border Post-Op Ag more frequent due to that a change in treatment regime may result in an initial increase in exudation.

Mepilex Border Post-Op Ag is intended for short-term use up to 4 weeks. For long-term use, a clinical assessment by a physician is recommended.

Special storage conditions and handling conditions

Mepilex Border Post-Op Ag should be stored in dry conditions below 25 °C/77 °F and protected from direct sunlight. Note that any color variances in Mepilex Border Post-Op Ag do not affect product performance or safety.

Disposal should be handled according to local environmental procedures.

Other information

If any serious incident has occurred in relation to the use of Mepilex Border Post-Op Ag, it should be reported to Mölnlycke Health Care and to your local competent authority.

Mepilex® and Safetac® technology are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

fr Mepilex® Border Post-Op Ag

Pansement hydrocellulaire siliconé auto-adhésif antimicrobien

Description du produit

Mepilex Border Post-Op Ag est composé d'une interface siliconée Safetac®, d'un coussin absorbant en mousse de polyuréthane contenant un composé à base d'argent et du charbon actif, d'une couche de fibres de polyacrylate superabsorbantes et d'un film en non-tissé, perméable à la vapeur et étanche à l'eau.

Mepilex Border Post-Op Ag est un pansement hydrocellulaire siliconé qui absorbe les exsudats et maintient un environnement humide pour la cicatrisation. Il est doté de propriétés antimicrobiennes.

Il a été démontré que Mepilex Border Post-Op Ag inactive les agents pathogènes associés aux plaies jusqu'à sept jours in vitro.

Composition du pansement :

Polyuréthane, silicone, polyacrylate, coton, viscose, polyester, polyoléfine, sulfate d'argent équivalent à 1,2 mg/cm^2 d'argent.

Indications

Le pansement Mepilex Border Post-Op Ag est indiqué pour le traitement de plaies exsudatives, telles que des plaies chirurgicales et traumatiques.

Mepilex Border Post-Op Ag peut aussi être utilisé sous des bandages compressifs.

Le sulfate d'argent présent dans le pansement aide à réduire la colonisation microbienne dans le pansement.

Précaution(s) d'emploi

- Ne pas utiliser le pansement Mepilex Border Post-Op Ag chez des patients et/ou des utilisateurs présentant une hypersensibilité connue aux composants du produit.
- Les cliniciens/professionnels de santé doivent être informés qu'il n'existe que très peu de données concernant l'utilisation prolongée et répétée de pansements à base d'argent, en particulier chez les enfants et les nouveau-nés.
- Mepilex Border Post-Op Ag peut provoquer une décoloration transitoire du lit de la plaie et de la peau périlésionnelle. Une utilisation fréquente ou prolongée de ce produit peut conduire à une décoloration permanente de la peau.
- En cas d'infection clinique avérée, Mepilex Border Post-Op Ag ne doit pas se substituer à un traitement systémique ou à tout autre traitement anti-infectieux adapté.
- Retirer Mepilex Border Post-Op Ag avant le début d'un traitement par radiothérapie si le produit se trouve sur la région à traiter. Un nouveau pansement peut être appliqué après le traitement.
- Éviter tout contact avec les électrodes ou les gels conducteurs au cours des enregistrements de l'activité électrique, par exemple lors des électrocardiogrammes (ECG) ou des électroencéphalogrammes (EEG).
- Ne pas utiliser Mepilex Border Post-Op Ag avec des agents oxydants, tels que des solutions d'hypochlorite ou du peroxyde d'hydrogène.
- À l'exception d'une solution saline ou de l'eau, l'interaction de Mepilex Border Post-Op Ag avec des agents nettoyants n'a pas été démontrée.
- L'interaction de Mepilex Border Post-Op Ag avec d'autres traitements locaux n'a pas été démontrée.
- Usage externe uniquement.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et entraîner une contamination croisée.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage stérile est ouvert ou endommagé avant utilisation. Ne pas restériliser.
- Ne pas utiliser après la date de péremption. Les propriétés du produit ne peuvent pas être garanties en cas d'utilisation après sa date de péremption.